

Pillows

SleepAngel®

Des oreillers sûrs et durables

L'oreiller soutient la tête à un niveau confortable et assure un bon alignement de la colonne vertébrale. Il est positionné au plus près des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles du dormeur.

Il est donc essentiel de fournir un oreiller sûr et qui offre un bon soutien.


Les oreillers SleepAngel dotés de la technologie de filtrage PneumaPure® y parviennent en offrant à vos patients un confort optimal et une hygiène imbattable, tout en réduisant l'empreinte écologique grâce à une utilisation à long terme.




- **Confort supérieur** - les oreillers SleepAngel sont utilisés dans les hôpitaux et les maisons de soins du monde entier.
- **Prévention et contrôle des infections** – les positionneurs hermétiques sont ventilés par le filtre PneumaPure® et constituent une barrière contre les liquides, les agents pathogènes et les allergènes.
- **Choix durable** - les produits peuvent être utilisés en toute sécurité plus longtemps que les oreillers traditionnels et n'ont pas besoin d'être lavés ou nettoyés à sec.

Pas de taches, pas d'odeurs
toujours un oreiller neuf

Pas de lavage ni de nettoyage à sec
nettoyage par essuyage, désinfection, pas besoin de protège-oreiller

PrimaLoft® Bio™  **PRIMALOFT. BIO™**
Option de garnissage en fibres synthétiques durables et biodégradables

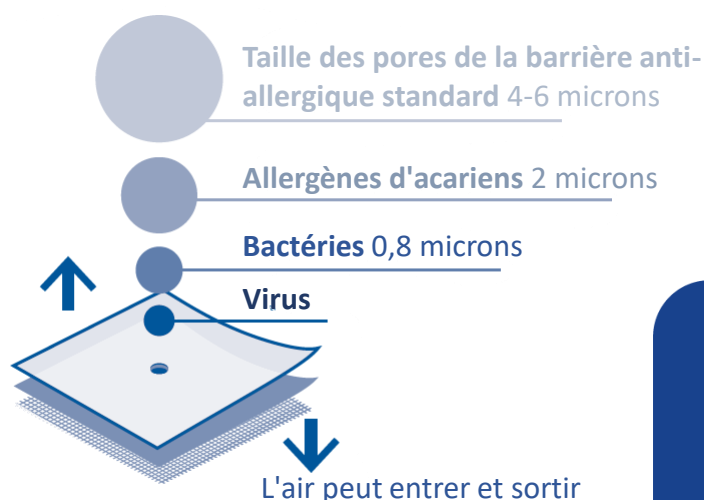

PneuMaPure® Filter technology

“

Sustainable choice for dignified bed environment. SleepAngel combines premium comfort with unique infection prevention and control functionalities.

PneumaPure® filter technology

SleepAngel®

Le filtre PneumaPure® est un composite filtrant nano-poreux hautement spécialisé (c'est-à-dire composé de pores extrêmement petits) qui fonctionne comme une barrière efficace contre les agents pathogènes, notamment les bactéries, les virus et les champignons, ainsi que contre la pénétration de liquides, tout en restant hautement perméable à l'air.

Composants de la barrière

Protection en tissu **PureShield** : textile durable, doux au toucher et très performant, qui bloque les contaminants. Perméable à la vapeur et imperméable à l'eau ;

Coutures **SafeWeld** : les coutures thermoscellées constituent une barrière complète -pas de trous de couture ;

Filtre **PneumaPure®** : le filtre mécanique respirant permet un flux d'air propre dans l'oreiller, mais bloque les agents pathogènes et les allergènes.



Certified as Class I Medical Device in the EU
Registered Class I Medical Device within the FDA
Approved and registered with the SFDA

La technologie du filtre PneumaPure® est protégée par un brevet mondial, testée et prouvée de manière indépendante par Airmid Healthgroup. La gamme de produits comprend des oreillers, des matelas, des positionneurs, des couvertures, des surmatelas et d'autres produits à surface souple.

Inspection et nettoyage

SleepAngel, accompagné d'un protocole d'audit et de nettoyage, garantit un environnement sûr pour le patient.

- Contrôlez régulièrement le produit - inspectez visuellement les coutures, le tissu et les filtres du produit pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou troués. Un produit troué ou dont le tissu ou le filtre est endommagé doit être éliminé.
- Nettoyez le produit au moins une fois par semaine, après chaque sortie de patient ou lorsqu'il est sale. Nettoyez-le avec une solution d'eau et de détergent doux.
- Désinfectez l'oreiller si nécessaire.

Des instructions de nettoyage détaillées accompagnent le produit.



Matériaux de remplissage

Nous utilisons des matériaux innovants et éprouvés et travaillons avec des praticiens du monde entier pour trouver les meilleures solutions.



Contact

SleepAngel Medical is
produced by Gabriel Scientific

 www.SleepAngel-Medical.com
 info@SleepAngel-Medical.com

